



Göğüs Pompası

TR Kullanım Talimatları

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com

Ameda ailesine katıldığınız için tebrik ederiz!

Bebeğinizle yaşayacağınız emzirme yolculuğunuz boyunca emzirme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağımız için heyecanlıyız. Ameda göğüs pompası ve HygieniKit® Süt Toplama Sistemimiz sayesinde sütünüzü güvenli ve etkili bir şekilde sağlayabilir ve toplayabilirsiniz.

Ameda HygieniKit, pompadan ve hortumdan geçen havayı sütünüzle temas eden pompa parçalarından ayrı tutan bir diyaframa sahip kapalı bir sistemdir, böylece hortum kuru kalır. Diyafram, sütün hortuma geri gitmesini önler.

Emzirme, süt sağma veya Ameda ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.ameda.com adresini ziyaret edin. Daha fazla ürün bilgisi veya diğer ülkelerdeki geri bildirimler için Birleşik Devletler dışındaki distribütörlerin bir listesinin yer aldığı www.ameda.com adresini ziyaret edin.

Simge Sözlüğü



Uyan



Dikkat



Önemli



Yıkama
Talimatları



Evet



Hayır



Kullanım
Talimatlarına
Uyun



Kırılabilir



Güneş ışığından
koruyun



Kuru tutun



Taşıma/Saklama İçin Sıcaklık Sınırlaması



Taşıma/Saklama İçin Nem Oranı
Sınırlaması



Çalıştırma İçin Sıcaklık Sınırlaması



Çalıştırma İçin Nem Oranı Sınırlaması



Çalıştırma İçin Basınç Sınırlaması



Son Kullanma Tarihi



Üretici

CE 0197

Bu ürün, geçerli Avrupa yönetmeliklerine uygundur ve bir Onaylanmış Kuruluş tarafından denetlenmektedir.

SN

Seri Numarası

REF

Katalog Numarası

UoM

Ölçü Birimi



II. Sınıf /Çift Yalıtımlı



BF Tipi Uygulamalı Parça

IP22

Katı Parçacık / Sıvı Giriş
Sınıflaması



Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşya

EC

REP

Avrupa Topluluğu Yetkili
Temsilcisi

İÇİNDEKİLER

1. UYARILAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.....	4
2. KULLANIM AMACI.....	6
3. KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR.....	7
4. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	7
5. KURULUM TALİMATLARI	8
5.1 İlk Kullanımdan Önce: HygieniKit Temizliği	8
5.2 HygieniKit Süt Toplama Sisteminin Montajı	9
6. SAĞIMDAN ÖNCE KONTROL.....	11
7. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI.....	11
7.1 Güç Kaynağına Bağlama.....	11
7.2 Buton Kontrolü.....	12
7.3 LCD Simgeleri ve Modlar	13
7.4 Sağıma Başlama	14
7.5 Flanşı Oturtma	16
7.6 Süt Saklama Önerileri	16
8. HYGIENIKIT TEMİZLİĞİ	17
9. BAKIM	18
9.1 Göğüs Pompası Valf Kontrolü	18
9.2 Saklama ve Taşıma.....	18
10. SORUN GİDERME	19
11. GARANTİ.....	21
12. TEKNİK BİLGİLER	22
12.1 Teknik Özellikler	22
12.2 Elektromanyetik Uyumluluk	23
12.3 Ürün Bertarafı.....	26
13. ÇALIŞTIRMA VE SAKLAMA KOŞULLARI	27
14. SEHAYAT VEYA ULUSLARARASI KULLANIM	27
15. AMEDA AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR	29

1. UYARILAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle yakınlarda çocukların bulunduğu durumlarda, daima aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

TEHLİKE: Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- Elektrikli ürünü kullandıktan hemen sonra mutlaka fişten çekin.
- Banyo, duş ve yüzme esnasında **KULLANMAYIN**.
- Ürünü küvete, duşa, lavaboya veya havuza düşebileceği ya da çekilebileceği yerlere **KOYMAYIN** veya böyle yerlerde muhafaza **ETMEYİN**.
- Ürünü suya veya başka sıvıya **KOYMAYIN** ya da **DÜŞÜRMEYİN**.
- Suya düşmüş elektrikli ürünü almaya **ÇALIŞMAYIN**. Derhâl prizden çekin.

UYARI sembolü, uyulmaması halinde yaralanmayla veya göğüs pompasının hasarıyla sonuçlanabilecek önemli güvenlik talimatlarını belirtir. Aşağıdaki kelimelerle birlikte kullanıldığında uyarı sembolleri şunları ifade eder:

	UYARI Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
	DİKKAT Hafif yaralanmaya neden olabilir.
	ÖNEMLİ Maddi hasara neden olabilir.



UYARI: Yangın, elektrik çarpması, ciddi yanıklar veya yaralanmayı önlemek için:

- Elektrik prizine takılı durumdayken ürünü **ASLA** gözetimsiz bırakmayın.
- Ürün, çocukların yahut engelli kişilerin yanında yakın gözetim altında kullanılmalıdır.
- Ürünü bu Kullanım Talimatlarında tarif edildiği şekilde **SADECE** kullanım amacına uygun olarak kullanın.
- Üretici tarafından önerilmeyen parçalar **KULLANMAYIN**.
- Kullanmadan önce güç adaptöründe hasar veya açık kablolar olup olmadığını daima kontrol edin. Hasar ve/veya açık kablolar varsa güç adaptörünü kullanmayın ve **1.866.992.6332** numaralı telefonda Ameda Müşteri Hizmetleri ParentCare ekibini arayın.

- Kablosu veya fişi hasar görmüşse; düzgün çalışmıyorsa; düşmüş, hasar görmüş veya ıslanmışsa elektrikli ürünü **ASLA** çalıştırmayın.
- Kabloyu ısınmış yüzeylerden uzak tutun.
- Pilleri ters **TAKMAYIN**, şarj **ETMEYİN**, ateşe **ATMAYIN** veya diğer tip pillerle **KARIŞTIRMAYIN**. Aksi takdirde piller patlayabilir veya sızıntı yaparak yaralanmanıza neden olabilir. Tüm pilleri aynı zamanda değiştirin.
- **ASLA** uyurken veya uykuluyken kullanmayın.
- Herhangi bir açıklığın veya hortumun içine **ASLA** bir nesne koymayın veya atmayın.

Kullanımı Etkileyen Çevre Koşulları

- Dışarıda elektrik kablosuyla **KULLANMAYIN**.
- Oksijen veya aerosol sprey ürünlerinin kullanıldığı yerlerde **KULLANMAYIN**.



UYARI: Sağlık riskinden kaçınmak ve yaralanma riskini azaltmak için:

Bu bir kişisel bakım ürünüdür ve sadece bir kullanıcı tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, kullanıcılar arasında paylaşılmamalı, bir kullanıcıdan diğerine satılmamalı veya verilmemelidir. Sağmak anne sütü ile taşınan maddelerin veya enfeksiyonların bebeğe geçmesini engellemez.

Not: Hasarlıysa kullanmayın. Ürünü bu kılavuzda tarif edildiği şekilde sadece kullanım amacına uygun olarak kullanın.

- Pompayı araç sürerken **KULLANMAYIN**.
- Sağma işlemi doğumu tetikleyebilir; emzirme uzmanınız veya sağlık uzmanınız onay vermedikçe hamileyken **KULLANMAYIN**.
- İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra göğsünüzle ve anne sütüyle temas eden tüm parçaları (flanş, diyafram, valf ve şişe) temizleyin.
- Üretici tarafından önerilenler dışındaki bağlantı parçalarını **KULLANMAYIN**.
- Göğüs pompası kaidesinde mekanik veya elektriksel değişiklikler **YAPMAYIN**.
- Her kullanımdan önce tüm uygun pompa bileşenlerini kontrol edin. Parçalarda çatlak, çentik, aşınma veya yıpranma olup olmadığını kontrol edin. **KULLANMAYIN**, 1.866.992.6332 numaralı telefondan derhâl Ameda Müşteri Hizmetleri ParentCare ekibiyle iletişime geçin.
- Art arda iki kez sağım yaptıktan sonra sonuç alamazsanız sağım yapmaya devam **ETMEYİN**.
- Donmuş anne sütünü mikrodalgada veya kaynar suda **ISITMAYIN** ya da **ÇÖZDÜRMEYİN**. Mikrodalga sıvıları eşit biçimde ısıtmayabilir. Hem mikrodalga hem de kaynar su yanıklara sebep olabilir.

BOĞULMA TEHLİKESİ: Hortumları ve kabloları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

TIKANMA TEHLİKESİ: Küçük parçalar içerir; 3 yaşından küçük çocuklar için uygun **DEĞİLDİR**.



DİKKAT: Hafif yaralanmaya neden olabilir.

- Pompa kaidesinde pil takılıysa güç adaptörünü kullanmadan önce pilleri çıkarın.
- Kabloyu adaptör gövdesinin etrafına **DOLAMAYIN**.
- **SADECE** Ameda Mya Joy Göğüs Pompası için önerilen AC güç adaptörünü kullanın.
- Hortumu **KISALTMAYIN** veya göğüs pompası kitinde değişiklik **YAPMAYIN**.
- Güç adaptörünün voltajı ile güç kaynağının uyumlu olduğundan emin olun.
- AC güç adaptörünü duvar prizine takmadan önce pompa kaidesine takın.
- Pompa kaidesinin dışını nemli bezle silmeden önce AC güç adaptörünü güç kaynağından sökün ve pilleri çıkarın.
- Toz, hav ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Bunlar göğüs pompasında hasara neden olarak hızının veya emiş gücünün azalmasına yol açabilir.
- Sağım yaparken göğüs flanşını göğsünüzden çıkarmaya **ÇALIŞMAYIN**. Göğüs pompasını kapatın ve parmağınızla göğüs flanşını göğsünüzden ayırın ve çıkarın.
- Ürünü kullanırken pompayı **DAİMA** düz bir zemine yerleştirin.
- Pompa açıkken pilleri **DEĞİŞTİRMEYİN** ve pil bölmesi kapağını **AÇMAYIN**.
- Ürünü uzun süre saklayacaksanız pilleri çıkarın.



ÖNEMLİ: Maddi hasara neden olabilir.

- Göğüs pompasında kalıcı hasara neden olabileceğinden elektrikli ürünü **ASLA** suya veya sterilizatöre koymayın.
- Göğüs pompasını veya göğüs pompası parçalarını temizlerken antibakteriyel veya aşındırıcı temizleyiciler/deterjanlar **KULLANMAYIN**.
- Plastik şişeler ve plastik göğüs pompası kiti parçaları donunca kırılgan hale gelebilir ve düşünce kırılabilir.
- Şişeleri fazla **DOLDURMAYIN**. Taşmadan önce şişeleri değiştirin.
- Şişeler ve göğüs pompası kiti parçaları, yanlış kullanıldıklarında (ör. düşürme, fazla sıkma veya devirme) hasar görebilir.
- Sağım yapmadan önce şişeleri ve göğüs pompası kitinin parçalarını daima kontrol edin. Şişeler veya göğüs pompası kitinin parçaları hasar görürse sütü atın.



BU TALİMATLARI SAKLAYIN

2. KULLANIM AMACI


Ameda Mya Joy Göğüs Pompası, emzirme dönemindeki kadından bebeğe verilmek üzere süt sağlamak ve toplamak için tasarlanmıştır.

3. KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Bu ürünün kullanılmamasını gerektiren bilinen bir durum yoktur.

4. ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ameda Mya Joy ve HygieniKit
Süt Toplama Sistemi

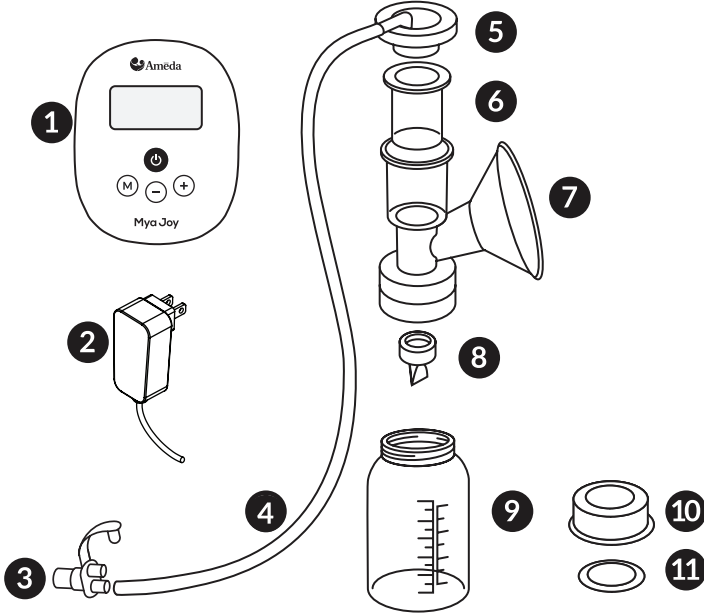

İçerik	
1. Ameda Joy Pompa Ünitesi	
2. Güç Adaptörü	
Ameda HygieniKit Süt Toplama Sistemi	3. Hortum Adaptörü
	4. Hortum
	5. Adaptör Başlığı
	6. Diyafram
	7. Göğüs Flanşı (25,0 mm)
	8. Silikon Valf
	9. Şişe
	10. Şişe Kilitleme Halkası Kapağı
	11. Şişe Kilitleme Diski


Pompa parçaları değişiklik gösterebilir.

5. KURULUM TALİMATLARI

5.1 İlk Kullanımdan Önce: HygieniKit Temizliği

İlk kullanımdan önce, sağlık uzmanı tarafından farklı bir talimat verilmedikçe ürünü aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:

1. Adaptör başlığını flanştan **ÇIKARIN**.
2. Adaptör başlığı, hortum ve hortum adaptörünü **BİR KENARA KOYUN**— Bunları birbirinden ayırmanıza gerek yoktur. Bu 3 parçanın ilk kullanımdan önce veya her kullanımdan sonra yıkanması **GEREKMEZ**— Bu parçalar sütle doğrudan temas etmez.

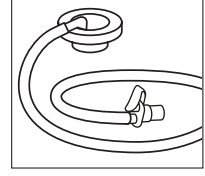

Adaptör başlığı, hortum ve hortum adaptörünü **YIKAMAYIN**.

Kalan parçaları, diyaframı, flanşı, valfi ve kilitleme halkası ve kilitleme diskisi dâhil olmak üzere süt saklama şişelerini parçalarına ayırın çünkü bunlar sağıma başladığınızda sütle temas edebilecek parçalardır.



Ellerinizi **DAİMA** su ve sabunla iyice yıkayın.

Kaynatarak STERİLİZE ETME



ÖNEMLİ: Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörünü bir kenara koyun. Bu parçaların yıkanması **GEREKMEZ**. Kaynamakta olan parçaların tencerenin tabanına değmesine müsaade **ETMEYİN**. Bu, parçaların hasar görmesine neden olabilir.



UYARI: Kaynamakta olan parçaları gözetimsiz **BIRAKMAYIN**. Parçaları kendinizi yakmamaya dikkat ederek kaynayan sudan alın. Kaynar su ve kaynar sudan çıkan buhar ciddi deri yanıklarına neden olabilir, bu nedenle parçaları kaynatırken ve kaynar sudan çıkarırken dikkatli olun.

Mikrodalgada STERİLİZE ETME: Buhar torbası üreticisinin

talimatlarına uyun.



ÖNEMLİ: Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörünü bir kenara koyun. Bu parçaların yıkanması **GEREKMEZ**.


- İlk olarak pompa parçalarını uygun şekilde temizleyin, aksi takdirde süt artıkları parçalara “yapışarak” bakteri üremesi için ortam sağlar.
- Lütfen sterilize etme işleminden önce ve sonra pompa kiti parçalarında çatlak, çentik, aşınma veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.



UYARI: Lütfen tedbirli davranın. Buhar torbasıyla ilgili en büyük risk haşlanmadır, bu nedenle anneler ve bakımverenlerin torbayı mikrodalgadan çıkarırken çok dikkatli olmaları gerekir.

5.2 HygieniKit Süt Toplama Sisteminin Montajı

Pompa parçalarının kuruduktan sonra ellerinizi yıkayın ve HygieniKit Süt Toplama Sistemini (Pompa Kiti) monte edin.

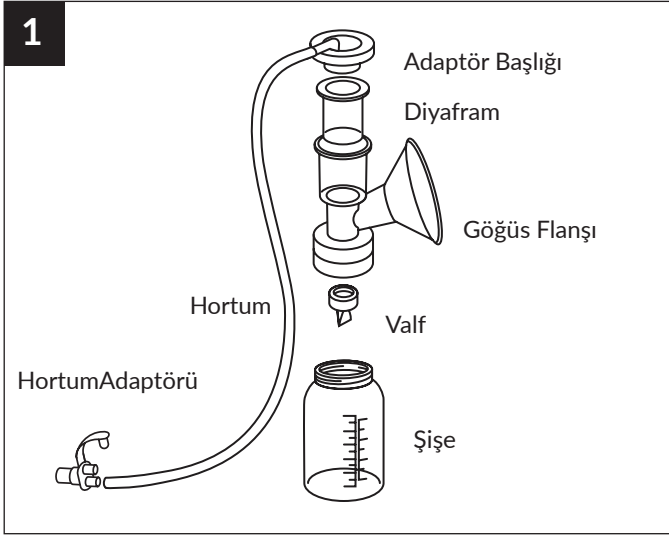

Çerçeveden veya valfin kalın yanlarından **TUTUN.**



Valfi iterek flanşın alt kısmına **TAKIN.**

4



Şişeyi **TAKIN** ve **SIKIN** veya süt saklama torbası takın.

5



Diyaframı flanşın üst kısmına **YERLEŞTİRİN**.
Hortum içerisinde nem oluşmaması için diyaframın iç kısmının tamamen kuru olması önemlidir.

6



Adaptör başlığını/başlıklarını, "pat" sesi duyana kadar flanş(lar)ın üst kısmına bastırarak **TAKIN**.

7



Hortumun hâlâ adaptör başlığına/başlıklarına ve hortum adaptörüne **BAĞLI** olması gerekir. Bunları öncesinde birbirlerinden ayırdıysanız hortumu adaptör başlığına/başlıklarına ve hortum adaptörüne bağlayın.

8a



Tek pompa için **MONTE EDİLMİŞ HYGIENİKİT**.

8b



Çift pompa için **MONTE EDİLMİŞ HYGIENİKİT**.

Pompa parçaları değişiklik gösterebilir.

6. SAĞIMDAN ÖNCE KONTROL



ÖNEMLİ: Ameda Mya Joy ve HygieniKit sistemini kullanmadan önce

parçalarda çatlak, çentik, aşınma veya yıpranma olup olmadığını kontrol edin.

Bunlar kitin fonksiyonunu etkileyebilir. Kusurlardan dolayı parça değişimi gerekirse lütfen yerel distribütörünüzü veya pompayı aldığınız yeri arayın. Hasarlı parçaları kullanmayın. Ülkenizdeki distribütörlerin listesi için lütfen www.ameda.com adresini ziyaret edin.

7. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

7.1 Güç Kaynağına Bağlama

Elektrik kaynağının seçimi ve kontrolü



AC GÜÇ ADAPTÖRÜ



UYARI: SADECE Ameda Mya Joy için önerilen AC güç adaptörünü kullanın.

Avustralya, Birleşik Krallık veya Avrupa yahut diğer uluslararası priz konfigürasyonlarına sahip AC güç adaptörleri ABD veya Kanada'da kullanıma uygun değildir.



UYARI: AC güç adaptöründe kabloların dolanması veya bükülmesi yahut yıpranmış veya açık kablolar gibi hasarlar olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Hasarlıysa kullanmayı derhâl bırakın ve **1.866.992.6332** numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayın.

1. Pompa kaidesine pil takılıysa AC güç adaptörü prizini kullanmadan önce pilleri **ÇIKARIN**.
2. AC güç adaptörünün küçük ucunu, gösterildiği gibi pompa kaidesinin sol tarafına **İTİN**.
3. Diğer ucu AC çıkışına **TAKIN**.

İPUCU: Yeni premium piller (Energizer, Duracell vb.) **KULLANIN** ve gösterildiği gibi doğru bir şekilde yerleştirin.

PİLLER



UYARI: Pilleri ters **TAKMAYIN**, şarj **ETMEYİN**, ateşe **ATMAYIN** veya diğer tip pillerle **KARIŞTIRMAYIN**. Aksi takdirde piller patlayabilir veya sızıntı yaparak yaralanmanıza neden olabilirler. Tüm pilleri aynı zamanda değiştirin.



1. Pompa kaidesinin altındaki pil bölmesini **AÇIN**.
2. Dört yeni AA pili gösterildiği şekilde **YERLEŞTİRİN**.
3. Pil bölmesini **KAPATIN**.

Düşük Pil Uyarısı

Piller düşük olduğunda LCD ekranda “Lo” uyarısı görüntülenir. Bu durumda tüm pilleri değiştirebilir veya AC Güç Adaptörünü kullanabilirsiniz.

7.2 Buton Kontrolü


A. AÇMA/KAPAMA BUTONU

B. MOD SEÇME BUTONU


Uyarı Modu ve Sağım Modu arasında geçiş yapar.

C. - / + ÇEKİŞ GÜCÜ SEVİYESİ

Sağım sırasında emme gücünü azaltır ya da artırır.

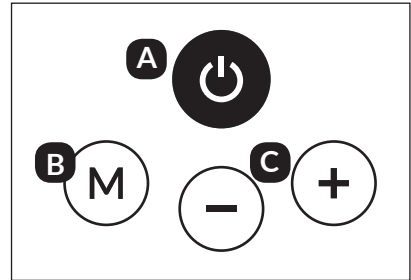

7.3 LCD Simgeleri ve Modlar

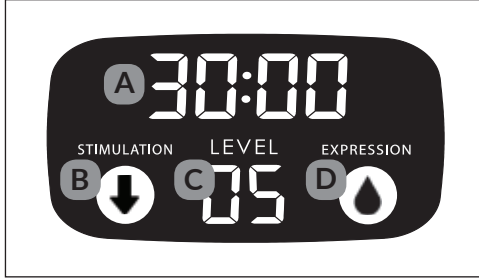

A. ZAMANLAYICI GÖSTERGESİ

Sağım zamanını takip eder. 45 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

B. UYARI MODU

Süt akışını başlatmak için bebeğin yüksek hızda ve düşük güçteki emişini taklit eder. Sağım Modunda bu simge kaybolur.

NOT: Manuel olarak daha önce geçmezseniz iki dakikanın ardından pompa otomatik olarak Sağım Moduna geçecektir.

C. EMME GÜCÜ SEVİYESİ

Sağım sırasındaki emme gücü seviyesidir. Ameda Mya Joy, 2 fazlı ayarlanabilir emme modlarına sahiptir:

- Uyarı Modu: 1 - 6 seviye
- Sağım Modu: 1 - 12 seviye

Seviyeyi düşürmek veya yükseltmek için  veya  butonuna basarak emiş gücü seviyesini ayarlayın.

D. SAĞIM MODU

Daha nazikçe ve verimli bir şekilde süt elde etmek için bebeğin yavaş, sabit emişini daha yavaş hızda ve yüksek emme gücü seviyesinde taklit eder. Uyarı Modunda bu simge kaybolur.

7.4 Sağıma Başlama

1. ADIM: GÜÇ ADAPTÖRÜNÜ BAĞLAYIN.

Güç adaptörünü pompa kaidesinin SOL tarafına takın.



2. ADIM: HORTUMU TAKIN

Hortumu adaptöre ve adaptörü pompa kaidesinin SAĞ tarafına takın, ardından bir yandan içeri doğru iyice iterken diğer yandan hafifçe sağa çevirin



A. **ÇİFT TARAFLI SAĞIM** için:
Her iki hortumun da hortum adaptörüne bağlanması gerekir.




B. **TEK TARAFLI SAĞIM** için:
Hortumlardan birini hortum adaptöründen çıkarın ve bir tarafı kapatın.



3. ADIM: FLANŞI GÖĞSÜNÜZE YERLEŞTİRİN


Flanşı göğsünüze yapışacak şekilde ORTALAYIN.

Göğüs flanşının oturup oturmadığını kontrol edin, sağım rahatsızlık verirse daha büyük veya daha küçük bir göğüs flanşı gerekebilir. Flanşınızı nasıl uygun şekilde oturtacağınızla ilgili bölüme bakın.

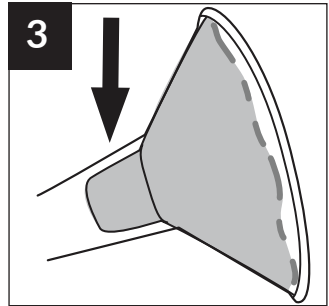

4. ADIM: POMPAYI ÇALIŞTIRIN

Cihazı çalıştırmak için Güç butonuna basın. Uyarı Modunda başlayacaktır.

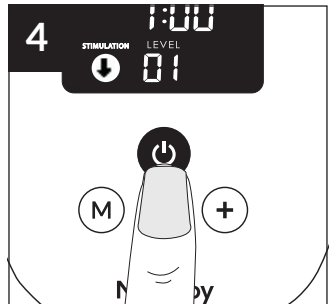


5. ADIM: ÇEKİŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ AYARLAYIN

Uyarı Çekiş Gücü Seviyesini 1 ila 6 arasında tercih ettiğiniz konfor seviyesine ayarlayın. Asla rahatsızlık veren bir seviyeye ayarlamayın.


İPUCU: Düşük emme gücüyle başlayın ve ardından konfor seviyenize göre emme gücünü kademeli olarak artırın. Rahat olduğunuz emme gücü seviyesi günden güne, gün içinde ve hatta aynı sağımlı işlemi sırasında değişebilir.

NOT: Manuel olarak daha önce geçmezseniz iki dakikanın ardından pompa otomatik olarak Sağım Moduna geçecektir.

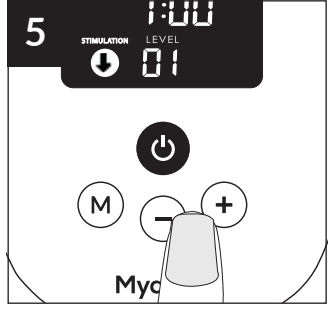

6. ADIM: MODU DEĞİŞTİRİN


Süt akışı başladığında Sağım Moduna geçmek için Mod butonuna basın.

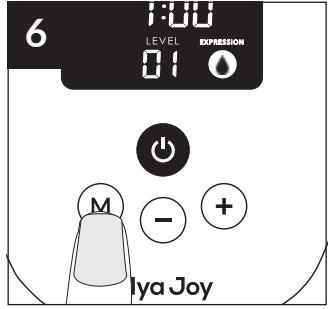

7. ADIM: ÇEKİŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ AYARLAYIN

Sağımlı Çekiş Gücü Seviyesini 1 ila 12 arasında tercih ettiğiniz konfor seviyesine ayarlayın. Asla rahatsızlık veren bir seviyeye ayarlamayın.


İPUCU: Düşük emme gücüyle başlayın ve ardından konfor seviyenize göre emme gücünü kademeli olarak artırın. Rahat olduğunuz emme gücü seviyesi günden güne, gün içinde ve hatta aynı sağımlı işlemi sırasında değişebilir.

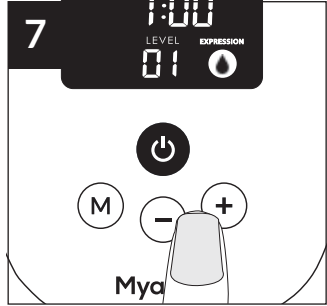

8. ADIM: SAĞIMI SONLANDIRIN


Sağımlı bitirmek istediğinizde ilk olarak Güç butonuna basın, ardından süt toplama kitini göğsünüzden çekin.

İPUCU: Pompa kapatıldıktan sonra gerekirse emişi kesmek için göğsünüz ile göğüs flanşı arasına bir parmağınızı YERLEŞTİRİN.

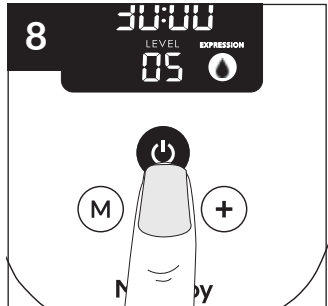


7.5 Flanşı Oturtma

Göğüs flanşının oturup oturmadığını kontrol edin, sağım rahatsızlık verirse daha büyük veya daha küçük bir göğüs flanşı gerekebilir.

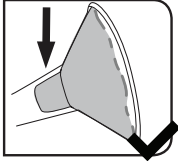


İYİ OTURUYOR

Sağım sırasında meme ucunuz göğüs flanşı tünelinde serbestçe hareket eder. Meme ucunun etrafında boşluk görürsünüz. Tünel içine Meme ucuyla birlikte çok fazla areola çekilmez.

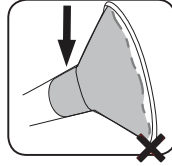

FLANŞ ÇOK KÜÇÜK

Sağım sırasında, meme ucunuzun bir kısmı veya tamamı göğüs flanşı tünelinin kenarlarına sürtünür.

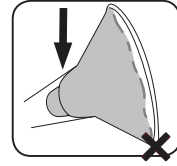

FLANŞ ÇOK BÜYÜK

Sağım sırasında, daha fazla areola meme ucunuzla birlikte göğüs flanşı içine çekilir. Areolanız, göğüs flanşı tünelinin kenarına sürtünebilir.

7.6 Süt Saklama Önerileri

NOT: Donmuş sütü çözündürürken, tamamen çözöldüğünde (yani, içinde buz kristali kalmadığında) çözölmüş olarak etiketleyin. Kabul edilebilir kullanım süresini belirlerken sütün dondurucudan alındığı zamanı değil tamamen çözöldüğü zamanı temel alın.

Anne Sütü	Oda Sıcaklığında	Buzdolabında	Dondurucuda
Taze Sağılmış	En fazla 6 saat	En fazla 5 gün	İdeal süre: 3 ay Optimum: En fazla 6 ay Kabul edilebilir: Derin dondurucuda en fazla 12 ay (-20° veya daha düşük sıcaklıkta)
Dondurulduktan sonra buzdolabında çözöldürölmüş ancak ısıtılmamış	En fazla 4 saat	En fazla 24 saat	Dondurmayın
Önceden dondurulmuş ve oda sıcaklığına getirilmiş	Beslenme tamamlanana kadar - oda sıcaklığında bir saat içinde tüketilmeli ve sonrasında atılmalıdır	En fazla 4 saat	Dondurmayın
Bebek beslenmeye başladı	Beslenme tamamlanana kadar ve sonrasında en fazla 4 saat buzdolabında saklanabilir	En fazla 4 saat	Dondurmayın
Dondurulduktan sonra çözöldürölmüş pastörize donör anne sütü	En fazla 4 saat	En fazla 48 saat	Dondurmayın
Derin dondurucuda dondurulmuş pastörize donör anne sütü	Geçerli Değil	Geçerli Değil	Sağım tarihinden itibaren 9 - 12 ay


Kaynak: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

8. HYGIENİKİT TEMİZLİĞİ

Her Kullanımdan Sonra: HygieniKit Temizliği

1. Adaptör başlığını flanştan **ÇIKARIN**.
2. Adaptör başlığı, hortum ve hortum adaptörünü **BİR KENARA KOYUN** — Bunları birbirinden ayırmanıza gerek yoktur. Bu 3 parçanın ilk kullanımdan önce veya her kullanımdan sonra yıkanması **GEREKMEZ**— Bu parçalar sütle doğrudan temas etmez.

Kalan parçaları, diyafram(lar)ı, flanş(lar)ı, valfi ve kilitleme halkası ve kilitleme diski dâhil olmak üzere süt saklama şişelerini parçalarına ayırın çünkü bunlar sağma başladığınızda sütle temas edebilecek parçalardır.

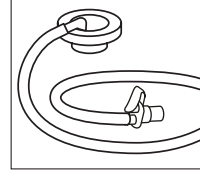

Adaptör başlığı, hortum ve hortum adaptörünü **YIKAMAYIN**.



Ellerinizi **DAİMA** su ve sabunla iyice yıkayın.

TEMİZLEME: Ilık, sabunlu suyla temizleme

Her kullanımdan sonra sağlık uzmanınız tarafından farklı bir talimat verilmedikçe, ürünü aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:




ÖNEMLİ: Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörünü bir kenara koyun. Bu parçaların yıkanması **GEREKMEZ**.

1




Pompa parçalarındaki tüm sütü soğuk suyla **DURULAYIN**.

2

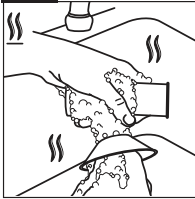


Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörü dışındaki tüm parçaları ılık sabunlu suyla elinizde **YIKAYIN**. Yıkarken valfin içerisine herhangi bir şey sokmayın.

3

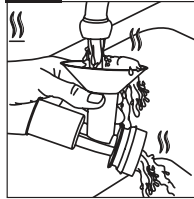

Ilık, temiz suyla **İYİCE DURULAYIN**.

4

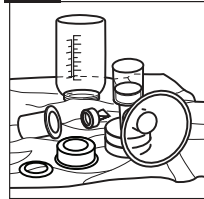

Her parçayı temiz bir yüzeye koyarak kendi kendine **KURUMAYA** bırakın.

*Ameda, temizlik için valflere ve geri akış koruyucularına herhangi bir şey sokulmasını önermez, ancak bir fırça veya sterilize edici buhar torbası kullanmak istiyorsanız kullanımdan önce ve sonra çatlak, çentik, aşınma veya deformasyon olup olmadığını kontrol etmeniz çok önemlidir.

Pompa parçaları değişiklik gösterebilir.



ÖNEMLİ: Flaşlar ve süt saklama kapları standart, ev tipi bulaşık makinesinin üst rafında da yıkanabilir. Çözücü veya aşındırıcı **KULLANMAYIN**. Temiz bir yüzeyde kendi kendine kurumaya bırakın. Parçaları, Buharlı Biberon Sterilizatörlerine veya Mikrodalga Sterilizatör Torbalarına **KOYMAYIN**.

Pompanın temizlenmesi: Göğüs pompasını ve güç adaptörünü temiz, nemli bir bezle silmeden önce fişinin çekildiğinden emin olun.

9. BAKIM

Göğüs pompası kaidesi gerekli olduğunda pillerin değiştirilmesi dışında herhangi bir servis veya bakım gerektirmez.

9.1 Göğüs Pompası Valf Kontrolü



Valflerde aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin. Sağımdan önce tüm hasarlı valfleri değiştirin. Her temizleme işleminde valfleri yıkayın. Valflere şişe fırçası veya benzer şeyler sokmayın. Yaklaşık her 8-12 haftada bir valflerin değiştirilmesini tavsiye ediyoruz, ancak bu süre temizleme ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir.

9.2 Saklama ve Taşıma

Ürünü taşımadan veya saklamadan önce HygieniKit'i ve güç adaptörünü pompadan sökün. Ürünü, bu talimatlarda açıklanan koşullarda saklayın. Ürünü uzun süre saklayacaksa pilleri çıkarın. Ürünü taşıırken dikkatli olun.

10. SORUN GİDERME

YAVAŞ SÜT AKIŞI, DÜZENSİZ EMİŞ VEYA EMİŞİN OLMAMASI	VALF KONTROLÜ Valflerde aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin. Sağımdan önce tüm hasarlı valfleri değiştirin. Her temizleme işleminde valfleri yıkayın. Valflere şişe fırçası veya benzer şeyler sokmayın. Yaklaşık her 8–12 haftada bir valflerin değiştirilmesini tavsiye ediyoruz, ancak bu süre temizleme ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir. BAĞLANTI KONTROLÜ Montajın doğru olup olmadığını ve bağlantı noktalarının sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Hortum adaptörü ve hortum giriş yeri bağlantısı • Hortum adaptörü ve hortum bağlantısı Adaptör başlığının göğüs flanşına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Adaptör başlığını çıkarıp göğüs flanşına yeniden takmak faydalı olabilir. DİYAFRAM VE FLANŞ/ŞİŞE KONTROLÜ Diyafraamlarda aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin. Sağımdan önce tüm hasarlı diyaframları değiştirin. Flanşlarda, adaptör başlığında veya şişelerde çentik, çatlak, kırık veya başka herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Sağımdan önce tüm hasarlı flanşları/adaptör başlıklarını/şişeleri değiştirin. GÖĞÜS FLANŞI OTURMA KONTROLÜ • İyi Oturuyor: Meme ucu flanş tüneline serbestçe hareket ediyor. • Çok Küçük: Meme ucu flanş tüneline sürtünüyor. • Çok Büyük: Areola flanş tüneline çekiliyor.
TISLAMA SESİ VEYA HAVA KAÇAĞI DUYULMASI	VALF KONTROLÜ Valflerde aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin. Sağımdan önce tüm hasarlı valfleri değiştirin. Her temizleme işleminde valfleri yıkayın. Valflere şişe fırçası veya benzer şeyler sokmayın. Yaklaşık her 8–12 haftada bir valflerin değiştirilmesini tavsiye ediyoruz, ancak bu süre temizleme ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir. BAĞLANTI KONTROLÜ Montajın doğru olup olmadığını ve bağlantı noktalarının sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Hortum adaptörü ve hortum giriş yeri bağlantısı • Hortum adaptörü ve hortum bağlantısı Adaptör başlığının göğüs flanşına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Adaptör başlığını çıkarıp göğüs flanşına yeniden takmak faydalı olabilir.

Hâlâ sorularınız veya sorunlar varsa lütfen **1.866.992.6332** numaralı telefondan Ameda yetkili müşteri hizmetleri ParentCare ekibini arayın.

GÜÇ KAYNAĞI	AC GÜÇ ADAPTÖRÜ Ameda Mya Joy, AC Güç Adaptörü ile kullanım için optimize edilmiştir. AC güç adaptörünün pompa kaidesinin yan tarafına tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Pompa kaidesinde pil olmadığından emin olun. Pompayı açmak için emiş kadranını yukarı çevirdiğinizden emin olun. Pompanızı farklı bir elektrik prizinde deneyin. AA PİLLER Göğüs pompası kaidesindeki pil bölmesine pillerin gösterildiği gibi doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Yeni premium piller (Energizer, Duracell vb.) kullanın. AC güç adaptörü pompa kaidesinin yan tarafına takılıyken pilleri kullanmayın. Sorun devam ederse başka bir pilli cihazda pillerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
LCD Ekranda “Lo” Uyarısı	AA piller düşük olduğunda LCD ekranda “Lo” uyarısı görüntülenir. Bu durumda tüm pilleri değiştirebilir veya AC Güç Adaptörünü kullanabilirsiniz.
LCD Ekranda “ERR” Uyarısı	• Güç adaptörünün doğru voltaj özelliklerinde (Onaylı Ameda güç adaptörü) olduğundan emin olun. • Güç adaptörünü değiştirin. • 1.866.992.6332 numaralı telefondan Ameda ile iletişime geçin.

FCC BEYANI

Bu cihaz; FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz; zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazit dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Dikkat: Ameda tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not:

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihazın sahip olması gereken sınırlara uyduğu görülmüştür. Bu sınırlar, evde kurulum durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlarda belirtildiği şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo iletişimde zararlı parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi yoktur. Bu ekipmanın, radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite neden olması durumunda (ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilir) kullanıcının paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya birden fazlasını uygulayarak düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takmak.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine danışmak.

11. GARANTİ

AMEDA GARANTİSİ KİŞİLER ARASINDA DEVREDİLEMEZ. AMEDA MYA JOY ELEKTRİKLİ GÖĞÜS POMPASININ ("ÜRÜN") GARANTİSİ, YALNIZCA ASIL KULLANICI ("İLK KULLANICI") (KURUM VEYA KİŞİ OLABİLİR) İÇİN GEÇERLİDİR. Ameda Company, Inc. ("Ameda"), Ürün için Bireysel Kullanıcıya, Bireysel Kullanıcının bu ürünü satın alma tarihinden itibaren malzeme veya işçilik kusurlarına karşı pompa mekanizması için iki yıl ve göğüs pompası valfleri hariç diğer pompa bileşenleri için 90 gün garanti verir. Ameda'nın bu sınırlı garanti kapsamındaki tek yükümlülüğü, Ameda tarafından kusurlu olduğu ve söz konusu kusurun bu açık sınırlı garanti kapsamında olduğu tespit edilen Ürünün Ameda'nın tercihiyle bağli olarak onarılması veya yenisiyle değiştirilmesidir. Bu sınırlı garanti kapsamında onarım veya değiştirme, İlk Kullanıcı için tek ve yegane çözümdür.

GARANTİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTEREN FİŞ VEYA SATIŞ FATURASI GİBİ BİR SATIN ALMA BELGESİ SUNULMALIDIR. Bu sınırlı garanti, Ameda tarafından SADECE İlk Kullanıcıya verilir ve başkasına verilemez veya devredilemez. Garanti hizmeti için 1.866.992.6332 numaralı telefonda Ameda ile iletişime geçin.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA YASAKLANAN DURUMLAR HARİCİNDE, BU ÜRÜNÜN PAZARLANABİLİRLİĞİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİ İŞBU BELGEYLE REDDEDİLMEKTEDİR. AMEDA, ÜRÜNE VERİLEN BU AÇIK SINIRLI GARANTİNİN VEYA KANUN MUCİBİNDE DOĞAN TÜM ZİMNİ GARANTİLERİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İHLALİ İLE İLGİLİ ARIZI, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR İÇİN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN AÇIK SINIRLI GARANTİNİN DIŞINDA BU ÜRÜNE İLİŞKİN BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YOKTUR VE TÜM SÖZLÜ, YAZILI VEYA DİĞER TÜRLÜ BEYANLAR İŞBU BELGEYLE REDDEDİLMEKTEDİR.

GARANTİNİN UYGULANAMAMASI

Garantiyle ilgili yukarıda ele alınan diğer sınırlamalara ek olarak, aşağıdakilerden birinin gerçekleşmesi garantinin sona ermesine veya geçersiz olmasına neden olacaktır:

- (i) Üründeki hasarın yanlış kullanımdan kaynaklanması.
- (ii) Pompa motorunun açılması, modifikasyonlar, yetkisiz onarım veya bu kılavuzdaki talimatların dışında kullanım garantiyi geçersiz kılar.
- (iii) Ameda tarafından Bireysel Kullanıcının Ürüne uygun şekilde bakım yapmadığının belirlenmesi.
- (iiii) Ameda tarafından Ürünle birlikte Ameda onayı olmayan aksesuarların veya yedek parçaların kullanıldığının tespit edilmesi.

Yukarıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Ameda, Üründe ve parçalarda meydana gelen hasarlardan veya doğrudan veya dolaylı olarak bunlardan kaynaklanan yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen garanti şartları, satın alınan Ürüne ilişkin yazılı ve başka türlü tüm önceki garantilerin yerini alır.

Birleşik Devletler Dışında: Yerel distribütörünüzü veya Ürünü aldığınız yeri arayın. Ülkenizdeki distribütörlerin listesi için lütfen www.ameda.com adresini ziyaret edin.

12. TEKNİK BİLGİLER

12.1 Teknik Özellikler

Ürün Açıklaması	Elektrikli Göğüs Pompası
Model	Ameda Mya Joy
Emiş Gücü	Uyarı modu: Yaklaşık -40 ~ -170 mmHg
	Sağım modu: Yaklaşık -50 ~ -250 mmHg
Çekiş Gücü Seviyeleri	Uyarı modu: 6 Seviye
	Sağım modu: 12 Seviye
Dakikadaki Devir Sayısı	Uyarı modu: 80 ~ 120 DDS
	Sağım modu: 20 ~ 65 DDS
Göğüs Kalkanı Boyutları	25 mm
Güç Kaynağı	Tıbbi AC Adaptör - Çıkış gücü: 6,0 VDC/1 A, 1000 mA Giriş gücü: 100 – 240 VAC 50/60 HZ
	Dört adet 1,5 V alkali AA pil (ÜRÜNE DÂHİL DEĞİLDİR)
Pil Ömrü	Yaklaşık 1,5 saat; farklı pil türleri pil ömrünü etkileyebilir
Ek Fonksiyon	45 dakikadan sonra otomatik Güç Kapama
Ünite Ağırlığı	Yaklaşık 232,6 g (8,2 oz) - pil hariç Yaklaşık 328,4 g (11,6 oz) - pil dâhil
Ünite Boyutları	110 x 93 x 55 mm (U x G x Y)
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
	Nem Oranı: %15 ~ 93 Bağıl Nem
	Basınç: 70 kPa ~ 106 kPa
Saklama Ortamı Taşıma	Sıcaklık: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
	Nem Oranı: ≤%93 Bağıl Nem
Beklenen Kullanım Ömrü	Cihazınız, olabilecek en yüksek düzeyde özenle tasarlanmış ve geliştirilmiştir ve 400 saatlik bir kullanım ömrüne sahiptir.
Giriş Koruması Derecesi	IP22
Sınıflandırma	Dâhilî Güç Kaynaklı Ekipman, Tip BF
Koruma Sınıfı	II. Sınıf /Çift Yalıtımlı

Teknik özelliklerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

12.2 Elektromanyetik Uyumluluk

Bu cihaz aşağıdaki standartlara uygundur:

IEC 60601-1-11 Elektrikli tıbbi ekipman – Kısım 1-11: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar– Yardımcı Standart: Elektrikli tıbbi ekipman ve evde sağlık bakımı ortamında kullanılan elektrikli tıbbi sistemler için gereklilikler; IEC 60601-1-2 (EMC), AAMI/ANSI ES60601-1 (Güvenlik) standartları gerekliliklerine uygundur. Üretici, ISO 13485 belgelidir.

TABLO 1

Elektromanyetik emisyonlara ilişkin kılavuz ve üretici beyanı		
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.		
Emisyon testi	Uygunluk	Elektromanyetik ortam - kılavuz
Işınan emisyon CISPR 11	Grup 1, sınıf B	Cihaz, RF enerjisini sadece dâhilî işlevi için kullanır. Bu nedenle emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir parazite neden olma ihtimali düşüktür.
İletilen emisyon CISPR 11	Grup 1, sınıf B	Cihaz, evsel ortamlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dâhil tüm ortamlarda kullanılmaya uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Sınıf A	
Voltaj dalgalanmaları/ kırıpşma emisyonları IEC 61000-3-3	Uygun	

TABLO 2

Elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı (Evde sağılık bakımı ortamı için)			
Cihaz, aşığıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
BAĞIŞIKLIK testi	IEC 60601 test seviyesi	Uygunluk seviyesi	Elektromanyetik ortam-kılavuz
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV temas ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV hava	± 8 kV temas ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV hava	Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması gerekir. Zeminler sentetik materyal ile kaplıysa bağıl nemin en az %30 olması gerekir.
Elektrostatik geçici rejim/patlama IEC 61000-4-4	±2 kV, 100 kHz, AC güç portu için	±2 kV, 100 kHz, AC güç portu için	Şebeke elektriğı kalitesi, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.
Dalgalanma IEC EN 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV (diferansiyel mod)	±0,5 kV, ±1 kV (diferansiyel mod)	Şebeke elektriğı kalitesi, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.
Güç kaynağı giriş hatlarındaki voltaj düşüşleri, kısa süreli kesintiler ve voltaj değışimleri IEC 61000-4-11	%0 UT; 0,5 devir 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°de %0 UT; 1 devir ve %70 UT; 25/30 devir Tek faz: 0°de %0 UT; 250/300 devir	%0 UT; 0,5 devir 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°de %0 UT; 1 devir ve %70 UT; 25/30 devir Tek faz: 0°de %0 UT; 250/300 devir	Şebeke elektriğı kalitesi, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz veya 60 Hz	30 A/m; 50 Hz veya 60 Hz	Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari ortam veya hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak seviyelerde olması gerekir.

TABLO 3

Elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı (Evde sağlık bakımı ortamı için)			
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
BAĞIŞIKLIK testi	IEC 60601 test seviyesi	Uygunluk seviyesi	Elektromanyetik ortam - kılavuz
İletilen RF IEC/ EN 61000-4-6	0,15 – 80 MHz için 3 V; 0,15 ila 80 MHz arasındaki ISM ve amatör radyo bantları için 6 V	0,15 – 80 MHz için 3 V; 0,15 ila 80 MHz arasındaki ISM ve amatör radyo bantları için 6 V	Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, kablolar da dâhil olmak üzere cihazın hiçbir kısmına tavsiye edilen ve vericinin frekansı için geçerli olan denklemle hesaplanan ayırım mesafesinden daha yakın olarak kullanılmamalıdır.
Yayılan RF IEC 61000-4-3	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 9 V/m	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 HZ, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 HZ, 930 MHz 28 V/m 20 MHz, 1845 HZ, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 40 MHz, 5500 HZ, 5785 MHz 9 V/m	Tavsiye edilen ayırım mesafesi: 80 MHz ila 800 MHz 800 MHz ila 2,7 Ghz Bu denklemde P, vericinin üreticisi tarafından belirtilen Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücünü ve d, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayırım mesafesini belirtir. Elektromanyetik alan incelemesiyle belirlenen sabit RF vericilerinin alan güçleri olan a değerinin her frekans aralığındaki uygunluk seviyesinden daha az olması gerekir. Aşağıdaki sembolü taşıyan ekipmanın yakınında parazitlenme oluşabilir:
			

TABLO 4

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları ve cihaz arasında bulunması tavsiye edilen ayırım mesafeleri (Evde sağlık bakımı ortamı için)		
Cihaz, yayılan parazitlerin kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. Müşteri ya da ürünün kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı (vericiler) ile ürün arasında, iletişim cihazının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda tavsiye edilen minimum ayırım mesafesini koruyarak elektromanyetik parazitin önlenmesine yardımcı olabilir.		
Vericinin maksimum anma çıkış gücü W	Verici frekansına göre ayırım mesafesi m	
	80 MHz ila 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz ila 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23
Yukarıda sıralananların dışındaki maksimum anma çıkış gücüne sahip vericiler için metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayırım mesafesi olan d, vericinin frekansına uygulanan denklem kullanılarak hesaplanabilir; bu denklemde P değeri, vericinin üreticisi tarafından belirtilen watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeridir. NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığına ait ayırım mesafesi geçerlidir. NOT 2: Bu kurallar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapıların, nesnelerin ve insanların neden olduğu emilim ve yansımalarından etkilenir.		

12.3 Ürün Bertarafı

Bu ürün, elektrikli ve elektronik donanım içermektedir.



1. Bu ürünün iç bileşenleri zararlı maddeler içerebilir. Bu ürünü, yerel veya bölgesel atık yönetim sistemleri ve düzenlemelerine göre bertaraf edin.
2. Ayrılmamış kentsel atık olarak bertaraf etmeyin.
3. Bu ürünün çevresel performansı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.ameda.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

13. ÇALIŞTIRMA VE SAKLAMA KOŞULLARI



Çalıştırma Koşulları



Taşıma/Saklama Koşulları

14. SEYAHAT VEYA ULUSLARARASI KULLANIM



UYARI: SADECE Ameda Mya Joy Göğüs Pompası için önerilen AC güç adaptörünü kullanın. Avustralya, Birleşik Krallık, Avrupa veya diğer uluslararası priz konfigürasyonlarına sahip AC güç adaptörleri Kuzey Amerika'da kullanıma uygun değildir.

Ameda Mya Joy göğüs pompanızı satın aldığınız ülkenin dışına seyahat ediyorsanız seyahatinizde göğüs pompanızı kullanabilmeniz için pil veya seyahat ettiğiniz bölgeye özel Ameda Mya Joy AC güç adaptörü kullanmanız gerekir.



UYARI: Kendinize ciddi biçimde zarar verebilir veya göğüs pompasına hasar verebilirsiniz.

15. AMEDA AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

BAZI POMPALARDA ŞU AKSESUARLARDAN BAZILARI BULUNABİLİR:

Ayrıca bu aksesuarları veya yedek parçaları online olarak, yerel bir Ameda bayisinden veya Ameda sigortalı bir tedarikçi den sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ameda.com adresini ziyaret edin.



Dottie
Çanta



Minnie
Çanta



AC Güç
Adaptörü



Cool'N
Carry Süt
Saklama
Çantası



Soğutma
Elemanı



Anne Sütü
Saklama
Şişeleri



Store'N
Pour
Torbalar



Tek Elle
Kullanılan
Göğüs
Pompası



Şişe
Tutucular



21,0 mm
Flexishield™ Areola
Uyarıcı



25,0 mm
Göğüs
Flanşı



28,5 mm
Göğüs
Flanşları



28,5 mm
Geçme/30,5 mm
Göğüs Flanşı



32,5/36,0 mm
Göğüs Flanşı



Valf



Diyafram



Hortum



Hortum
Adaptörü



Adaptör
Başlığı



Kilitleme
Halkası



Kilitleme
Diski